

Angelcare®

EN	Baby Monitor with video, sound & Movement Sensor Pad	2
FR	Moniteur pour bébés avec vidéo, sons et détecteur de mouvements	11
ES	Monitor de video y sonidos con sensor de movimientos	19
PT	Intercomunicador para bebés com som, vídeo e detecção de movimentos	27
NL	Video, Geluid en Bewegingsmonitor	35
SV	Video-, rörelse- och ljudbevakning av spädbarn	43
DA	Babyalarm med video, bevægelses- og lydindikation	51
FI	Vauvan video-, liike- ja äänimonitori	59
PL	Monitor oddechu (ruchu) z nianią elektroniczną kamerą video	67
HU	Video-légzésfigyelő készülék kétirányú babaőrzővel	75



AC1100

Índice

Instalación en la habitación del bebé	19
Unidad para el cuarto del bebé	20
Unidad para los padres.....	20
Comprobación de su monitor Angelcare®	20
Ajustes de la unidad para los padres	21
Solución de problemas	24
Garantía	25
Mantenimiento de su monitor Angelcare®	25
Ajustes de fábrica y especificaciones técnicas.....	25

INCLUIDO



2 adaptadores de CA para el cargador de la unidad para los padres y la unidad para el cuarto del bebé


NO INCLUIDO



STEP 1 -Instalación en la habitación del bebé




INSTALACIÓN DEL SENSOR DE MOVIMIENTO BAJO EL COLCHÓN

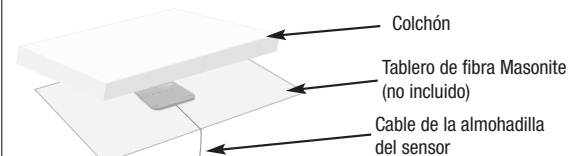


POSICIÓN DEL SENSOR DE MOVIMIENTO BAJO EL COLCHÓN

1 sensor

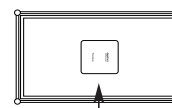


2 sensor

disponible sólo en algunos países

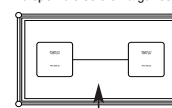


• La almohadilla del sensor debe apoyarse sobre una superficie completamente plana y rígida. **Coloque un tablero Masonite grueso de 6 mm (1/4") que cubra toda la cuna o con un tamaño mínimo de 28 cm (11") X 28 cm (11") X 6 mm (1/4") entre la base de la cuna y el colchón, cuando se utilice una almohadilla con sensor.** El tablero debe sostener la almohadilla del sensor contra el colchón para mantener el contacto entre la almohadilla y el colchón, en caso de que el bebé cambie de posición. Asegúrese de que el cable de la almohadilla del sensor pase por debajo del colchón, como se muestra.

- Coloque la almohadilla del sensor como se muestra, **en el centro de la cuna**. La cara impresa debe quedar hacia arriba.. No coloque ropa de cama entre el colchón y la almohadilla del sensor.
- Fije el cable de la almohadilla del sensor a la cuna por medio de una banda de sujeción. Extienda el cable sobre el piso para asegurarse de que esté fuera del alcance del bebé.
- La almohadilla del sensor funciona con todos los tamaños de camas y colchones para bebés, excepto con los colchones de espuma con memoria o los colchones de bastidor hueco.
- Deberá probar la almohadilla con sensor después de completar la instalación.
- La unidad para el cuarto también se puede instalar sobre un trípode (no incluido).

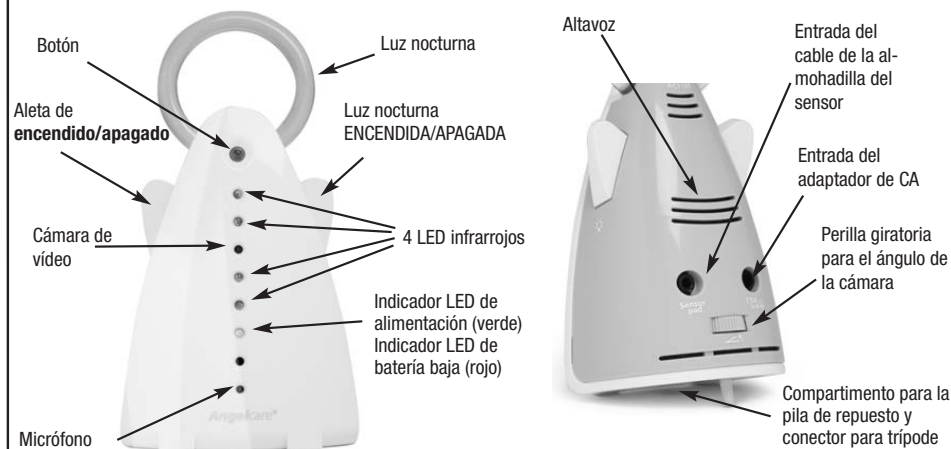STEP 2 - Unidad para el cuarto del bebé**ACCIONES**

- Conecte el cable de la almohadilla del sensor a la unidad para el cuarto de bebé.
- Introduzca 3 pilas normales AAA (no incluidas) en la unidad para el cuarto del bebé (pilas de repuesto por si hay un fallo de alimentación).
- Conecte el adaptador de CA a la unidad para el cuarto del bebé y enchufe el adaptador a una toma de corriente eléctrica en el cuarto del bebé.
- Mantenga pulsada la aleta izquierda durante 2 segundos para encender la unidad del cuarto del bebé.

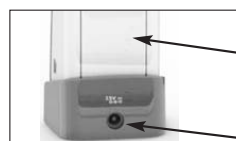STEP 3 - Unidad para los padres**E
S**

- Retire la presilla e introduzca 3 pilas recargables AAA NIMH (incluidas) en la unidad para los padres. NO use pilas alcalinas normales, ya que pueden explotar.
- Conecte el adaptador de CA al cargador de la unidad para los padres y enchufe el adaptador a una toma de corriente eléctrica. **Déjelo cargar durante 15 horas seguidas antes de utilizar el monitor por primera vez.**



- SUBIR sonido del altavoz
- BAJAR sonido del altavoz
- Pulsar y mantener pulsado para SILENCIAR
- Hablar - Mantener pulsado

**ENCENDIDO/
APAGADO**

Micrófono

Altavoz

Pantalla táctil
de LCD**ACCIONES**

- Dejar en el cargador durante 15 horas continuadas antes de usar el monitor.
- Mantenga pulsada el botón POWER durante 2 segundos para empezar a funcionar la unidad de los padres.

STEP 4 - Comprobación de su monitor Angelcare®

- Pruebe su monitor **ANTES** de utilizarlo por primera vez
- El monitor Angelcare se puede utilizar con los ajustes de fábrica o los puede modificar en el menú principal o de ajustes.

Nota: pruebe su monitor Angelcare® ANTES de usarlo por primera vez y después de forma periódica para garantizar un funcionamiento correcto. El monitor Angelcare® se puede utilizar fuera de la cuna en una zona de descanso diferente. Pruebe su monitor cuando mueva la almohadilla del sensor a una nueva ubicación para garantizar que la sensibilidad esté correctamente ajustada al nuevo relleno o colchón. Consulte la sección Ajuste de la sensibilidad de movimiento.

1. Compruebe el sonido. Asegúrese de que el modo sonoro esté activado. Pida a alguien que hable en la unidad para el cuarto del bebé o coloque una radio cerca de la unidad para el cuarto del bebé. Debería escuchar el sonido desde la unidad para los padres. Si no se emite ningún sonido, consulte la sección de solución de problemas.

2. Compruebe que su monitor detecte el movimiento. Asegúrese de que el cable de la almohadilla del sensor esté conectado a la unidad para el cuarto del bebé y después encienda las dos unidades. Asegúrese de que la función de movimiento esté activada. Mueva suavemente la mano sobre el colchón. El símbolo del péndulo se moverá con cada uno de sus movimientos. Retire la mano del colchón. Debido a la falta de movimiento, sonará un "tic" de alarma previa 15 segundos después y 5 segundos más tarde sonará la alarma.



3. COMPRUEBE LA DETECCIÓN DE LA ALARMA. Para detener la alarma, coloque su mano suavemente sobre el colchón para que la almohadilla del sensor comience a detectar nuevamente el movimiento. El icono del péndulo de la unidad para los padres comenzará a moverse de nuevo mientras la almohadilla del sensor detecta el movimiento. También puede pulsar el icono de alarma en la unidad para los padres, pulsar el botón de la parte superior de la unidad para el cuarto del bebé o apagar la unidad para el cuarto del bebé a fin de detener la alarma.

NOTA: si la alarma no suena, es posible que la almohadilla del sensor esté detectando una vibración continua sobre el suelo, una fuerte corriente de aire o que se esté tocando la cuna. Evite tocar la cuna cuando el monitor esté en uso. Coloque la cuna cerca de una pared de apoyo sólida y lejos de las corrientes fuertes de aire. Es posible que necesite reducir la sensibilidad de la almohadilla del sensor; consulte la sección Ajuste de la sensibilidad de movimiento.

4. COMPROBACIÓN DEL MODO DE ALIMENTACIÓN POR PILAS Compruebe que el modo de alimentación por pilas funcione al utilizar las dos unidades sin los adaptadores de CA. Si la luz verde de la unidad para el cuarto del bebé no se enciende, debe cambiar las pilas. Si la unidad para los padres no se enciende y no aparece la pantalla, necesita recargarse.


STEP 5 - Ajustes de la unidad para los padres



NOTA IMPORTANTE: los ajustes realizados en las pantallas del menú principal y los menús secundarios no se actualizarán si no se confirman mediante la tecla OK (confirmar/salir).

En las pantallas del menú principal o de los menús secundarios, si no se realiza ninguna acción con las teclas de los iconos durante 1 minuto, la pantalla volverá automáticamente a mostrar el vídeo. En ese caso, los ajustes modificados en el menú principal y los menús secundarios no se guardarán.

Nota: cuando se encuentre en el menú principal o en el menú de ajustes, la transmisión de sonido de la unidad para el cuarto del bebé a la unidad para los padres se desactiva temporalmente. La detección de movimiento se mantendrá activada si se habilitó esta opción.

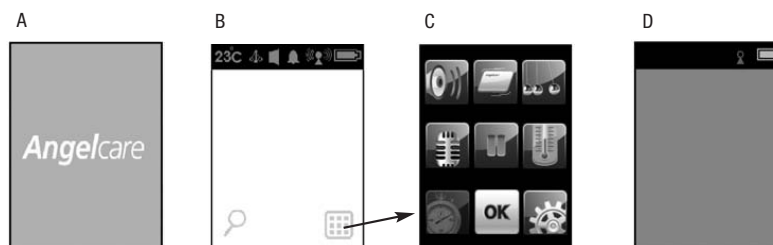

- Mantenga pulsada la tecla de encendido de la unidad para los padres hasta que aparezca una ventana azul con el logotipo de Angelcare (A).
- A continuación, la unidad para los padres mostrará la pantalla B con la captura del vídeo del cuarto del bebé.
- Toque el icono pequeño en la parte inferior derecha para acceder a la pantalla del menú (C).
- Si la unidad para el cuarto del bebé está apagada, aparecerá la pantalla D y la unidad para los padres se apagará automáticamente tras 1.5 minutos. En este caso, encienda la unidad para el cuarto del bebé y después la unidad para los padres nuevamente.

5.1 - Sonido



ON


- La transmisión de sonido desde la unidad para el cuarto del bebé puede estar encendida o apagada.

- Ajuste el nivel de sonido con los botones "UP" (+) (SUBIR) y "DOWN" (-) (BAJAR).

- Mantenga pulsado el botón "DOWN" (-) durante al menos 2 segundos para SILENCIAR el sonido.



OFF

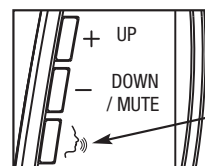

HABLAR: Mantener pulsado para hablar al bebé.

El icono de sonido aparecerá en la barra superior de la pantalla del vídeo cuando el sonido se active.



Sonido encendido



SILENCIO

Las barras de nivel aparecerán en la pantalla del vídeo durante unos segundos cuando cambie el volumen del altavoz.



5.2 - Movimiento



ON



OFF

La almohadilla del sensor que se encuentra bajo el colchón proporciona la detección de movimientos. Esta función se puede habilitar (ON) o deshabilitar (OFF). Cuando está habilitada, se activa una alarma cuando no se detecta ningún movimiento durante 20 segundos. Si recibe falsas alarmas, deberá ajustar la sensibilidad de la almohadilla del sensor al pulsar el icono de ajustes.

AJUSTE DE SENSIBILIDAD

Cuando utilice la función de movimiento, podrá ajustar la sensibilidad de la almohadilla del sensor en el menú de ajustes si fuera necesario



Pulse la tecla de sensibilidad de la almohadilla del sensor hasta el nivel que desee, desde 1 (más bajo) hasta 5 (más alto)




ALARMA DE AUSENCIA DE MOVIMIENTO

- Se acciona cuando la almohadilla del sensor no detecta ningún movimiento durante 20 segundos
- Los altavoces de la unidad para los padres y la unidad para el cuarto del bebé emitirán una alarma de advertencia de alto volumen.
- La pantalla LCD mostrará el icono de alarma sobre un fondo negro en lugar del video.
- **Atienda a su bebé de inmediato.**



El icono de movimiento aparecerá en la barra superior de la pantalla de video cuando el movimiento se active y el pequeño péndulo realizará un movimiento oscilante

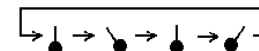

- **Para detener la alarma:** pulse el icono de alarma en la pantalla LCD de la unidad para los padres o mantenga pulsado el botón superior de la unidad para el cuarto del bebé, y la alarma se detendrá.

Pulse el icono de alarma



Púlselo y manténgalo pulsado



5.3 - Tic



ON



OFF

El sonido "tic" está relacionado con la almohadilla del sensor de movimiento. Esta emite un sonido en la unidad para los padres con cada movimiento del péndulo que indica que la función de movimiento está activada. Esta función solo está disponible si la monitorización de movimiento está activada.

5.4 - Pausa




Pulse la tecla del icono "hold" para poner su monitor en pausa. Cuando la unidad se encuentre en el modo "hold", la detección de movimiento y la alarma se deshabilitan. El altavoz de la unidad para los padres emite 3 pitidos consecutivos cada 30 segundos como recordatorio de que el monitor se encuentra en el modo "HOLD". Pulse la tecla del icono para volver al funcionamiento normal. La pantalla LCD vuelve entonces a mostrar el video de forma normal. También puede poner la unidad en pausa si pulsa el botón superior de la unidad para el cuarto del bebé y volver al funcionamiento normal si lo pulsa de nuevo.

5.5 - Temperatura



Su monitor indicará siempre la temperatura del cuarto del bebé. Puede recibir un aviso si la temperatura es muy alta o demasiado baja. Si la temperatura excede el intervalo que ha escogido, se activará una alarma. Pulse este icono del menú principal para ir al menú de ajuste de la temperatura.

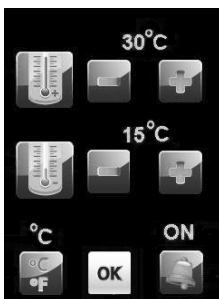

- Pulse los iconos "+" y "-" en la fila superior de la pantalla para ajustar la alarma de temperatura alta. (Intervalo establecido para la alarma de temperatura alta: de 22 a 40 °C / de 72 a 104 °F)
- Pulse los iconos "+" y "-" en el medio de la pantalla para ajustar la alarma de temperatura baja. (Intervalo establecido para la alarma de temperatura baja: de 5 a 19 °C / de 41 a 66 °F.)
- Pulse la tecla de la esquina inferior izquierda de la pantalla para cambiar la escala de la temperatura a Fahrenheit o Celsius. La escala modificada se indicará en la parte superior de la posición de la tecla tras el cambio.
- Si alarma de temperatura está encendida, aparecerá la palabra "ON" sobre el icono de la alarma y aparecerá encima de la barra de la pantalla del video.



Cuando la temperatura por la unidad para el cuarto del bebé alcance el límite (superior o inferior) que haya establecido, se activará la alarma de temperatura: se escucharán 4 pitidos consecutivos cada 5 segundos y el icono de alarma de temperatura se mostrará en el centro de la pantalla LCD.

5.6 - Vox



ON



OFF

La función Vox le permite colocar la recepción de sonido en el "modo de activación por voz". Con esa función activada solo escuchará los sonidos más altos que provengan del cuarto del bebé. Si la función está apagada, escuchará el sonido de forma continuada. La sensibilidad del micrófono se puede ajustar de la siguiente manera: Una sensibilidad baja del micrófono Vox significa que el sonido que provenga del cuarto del bebé deberá ser más alto para iniciar la transmisión de sonido en la unidad para los padres.



Pulse la tecla de sensibilidad del micrófono hasta el nivel que desee, desde 1 (más bajo) hasta 4 (más alto)

5.7 - Temporizador



ON (pulsar para detener)



OFF (pulsar para iniciar)

Cuando el TEMPORIZADOR se inicia desde el menú principal, la pantalla vuelve a mostrar el video y la TEMPORIZADOR desde 0:00 (0 horas y 00 minutos). El temporizador tiene un límite máximo de 5 horas y 59 minutos. Tras mostrar "5:59", se detendrá automáticamente y desaparecerá de la pantalla de video.

Nota: cuando la unidad para los padres se apaga, el temporizador se restablece automáticamente y se apaga.



5.8 - Configuración de la alarma



Pulse la tecla del icono de la izquierda en el menú de ajustes para seleccionar el modo de alarma. Puede seleccionar uno de los tres modos de alarma que aparecen a continuación:



Alarma sonora



Alarma sonora y vibración



Solo vibración



El icono del modo seleccionado aparecerá en la barra superior de la pantalla LCD de video

NOTA: cuando seleccione el modo "solo vibración", la alarma no sonará en la unidad para los padres, pero sí en la unidad para el cuarto del bebé. Cuando la unidad para los padres se coloca en la unidad del cargador, se desactiva la vibración y se cambia temporalmente al modo de solo alarma sonora. Durante el uso del menú principal y de ajustes, no se transmitirá ningún sonido a la unidad para los padres, pero si la almohadilla del sensor no detecta ningún movimiento, la alarma sonará. Las demás alarmas y notificaciones secundarias se desactivarán temporalmente.

5.9 - Vídeo apagado



Tecla de alimentación


Para reducir el consumo de las pilas, puede apagar la pantalla de video al pulsar la tecla de alimentación. Vaya al menú de ajustes para escoger si la pantalla de video se apagará tras 5, 10, 15 ó 20 segundos. Si no desea utilizar la cuenta regresiva de apagado del video, pulse "-" hasta que vea "OFF" en lugar de números sobre el símbolo "-".

ATENCIÓN: si mantiene pulsado el botón durante más de un segundo, la unidad para los padres se apagará.



Se mostrará 5-10-15, 20, u "OFF".

5.10 -Modo Zoom

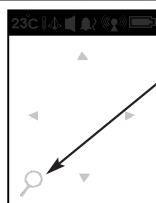

Pulse la tecla del icono ZOOM en la pantalla de video para ingresar en el modo ZOOM.


En el modo ZOOM, la pantalla de video se duplica y desaparece el icono del menú. Se muestran cuatro flechas en la pantalla LCD. Pulse la flecha que indique el sentido en que desea ampliar la pantalla.

Para volver a la pantalla de video normal, pulse el icono ZOOM de nuevo.



Pantalla de capacidad de la pila

El icono de capacidad de las pilas siempre se muestra en la pantalla LCD. Si la capacidad de la pila es demasiado baja o debe recargarse, la unidad para los padres emitirá un pitido de advertencia cada 15 segundos. Las pilas funcionarán para todas las operaciones normales hasta que alcancen 1/3 de su capacidad, entonces deberán recargarse. La pantalla del ciclo de carga se mantiene hasta que la capacidad de las pilas alcanza un nivel que permite un funcionamiento normal. Es preferible mantener la unidad en el cargador durante 16 horas para recargar completamente las pilas. Mientras la unidad para los padres esté en el cargador, el icono de las pilas aparecerá como se muestra.

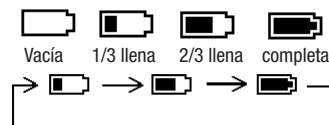

Señal entre las unidades

El icono de la antena siempre se muestra en la pantalla LCD. Indica la fuerza de la señal a la unidad para el cuarto del bebé. En función de la calidad de la recepción, los iconos se mostrarán. Cuando se pierde la señal entre la unidad para los padres y la unidad para el cuarto del bebé, se activa la alarma de "fuera de cobertura": 3 pitidos consecutivos que se escucharán cada 5 segundos. Aparecerá el icono de la alarma "FUERA DE COBERTURA" en la pantalla de la unidad para los padres. En la parte superior de la barra, aparecerá el icono de "señal perdida".



Icono de fuera de cobertura en la pantalla LCD



Buena señal
Señal baja
Señal perdida

En el caso de que la conexión entre la unidad del bebé y la unidad de los padres se haya perdido por completo, puede seguir estos pasos para recuperarla:

1. Antes de todo, apaga la unidad del bebé y la unidad de los padres.
2. Encienda la unidad del bebé.
3. Presione y suelte el ala izquierda 4 veces. La luz nocturna brillará.
4. Encienda la unidad de los padres. Aparecerá una pantalla azul con el icono del vínculo perdido en la barra superior.
5. Mientras presiona el botón de intercomunicación en el lado derecho de la unidad de los padres, presione y suelte la tecla de encendido de la misma unidad.
6. Aparecerá el video en la pantalla de la unidad de los padres, lo que significa que la conexión se ha recuperado satisfactoriamente.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
Falsas alarmas.	• El bebé se quitó de la cuna y no se apagó la unidad para el cuarto del bebé. • El cable de la almohadilla del sensor no está conectado correctamente a la unidad para el cuarto del bebé. • La almohadilla del sensor no está totalmente en contacto con el colchón de la cuna o el colchón de la cuna no se apoya sobre una superficie totalmente plana o rígida. • El bebé duerme muy profundamente o se ha alejado de la almohadilla del sensor hasta el borde de la cuna.	• Apague la unidad para el cuarto del bebé. • Compruebe la conexión entre la almohadilla del sensor y la unidad para el cuarto del bebé. Desenchufe el cable y vuelva a conectarlo. • Asegúrese de que no haya ropa de cama entre el colchón y la almohadilla del sensor. La almohadilla del sensor debe apoyarse sobre una superficie completamente plana y rígida. Coloque un tablero Masonite de 6 mm (1/4") para cubrir toda la base de la cuna. • Asegúrese de que la almohadilla del sensor esté colocada según se describe en la sección Instalación en la habitación del bebé. Es posible que tenga que ajustar la sensibilidad; consulte la sección Movimiento.
La alarma no suena.	• La unidad para el cuarto del bebé detecta movimiento cuando se toca la cuna. • La unidad para el cuarto del bebé detecta movimiento desde el exterior de la cuna, como dispositivos motorizados, fuertes corrientes de aire, etc. • La sensibilidad se ha ajustado en un nivel demasiado alto.	• Evite tocar la cuna cuando el monitor esté encendido. • Coloque la cuna cerca de un pared de apoyo sólida para evitar que la almohadilla del sensor detecte movimientos fuera de la cuna. • Es posible que deba reducir la sensibilidad. Consulte las secciones Comprobación de su monitor Angelcare® y Movimiento.
No se transmite ningún sonido.	• Las unidades están demasiado separadas (sonará la alarma de "fuera de cobertura"). • Las pilas tienen poca carga o no están instaladas correctamente. • Los adaptadores de CA no se han conectado correctamente o la toma de corriente eléctrica no funciona. • Una de las unidades está apagada.	• Acerque la unidad para los padres a la unidad para el cuarto del bebé. • Revise/sustituya las pilas o recargue la unidad para los padres • Compruebe las conexiones o utilice otra toma de corriente eléctrica. • Asegúrese de que las dos unidades están encendidas.
El indicador de alimentación de la unidad para el cuarto del bebé (luz verde) no se enciende.	• Los adaptadores de CA no se han conectado correctamente o la toma de corriente eléctrica no funciona. • La unidad para el cuarto del bebé está apagada.	• Compruebe las conexiones o utilice otra toma de corriente eléctrica. • Mantenga pulsada la aleta izquierda durante 2 segundos para encender la unidad del cuarto del bebé.
Señal muy débil	• Las unidades están demasiado separadas y el indicador "fuera de cobertura" está apagado. • Una de las unidades, o las dos, están colocadas cerca de una amplia masa metálica. • Una de las dos unidades, o ambas, no están en posición vertical. • Las pilas tienen poca carga.	• Acerque las dos unidades. • Cambie la posición de una de las unidades o de las dos. • Coloque las unidades sobre una superficie plana fuera del alcance del bebé. • Sustituya las pilas o recargue la unidad para los padres.
Estática, distorsión, interferencia (interferencia de otros monitores, teléfonos inalámbricos, transmisores-receptores portátiles, etc.).	• La unidad para los padres está ubicada cerca de dispositivos motorizados, lámparas fluorescentes, televisores, etc.	• Gire la unidad para los padres o aléjela de la fuente de interferencia.
Interferencia de señal (sonidos altos emitidos desde la unidad para los padres).	• Las unidades están demasiado cerca.	• Separe las unidades entre sí (al menos 3 metros/10 pies). • Baje el volumen de la unidad para los padres.
La pantalla de la unidad para los padres está negra.	• La unidad para los padres está apagada. • Es posible que haya empujado accidentalmente la tecla de alimentación y entró en el modo de ahorro de energía.	• Mantenga pulsada la tecla de alimentación durante 2 segundos para encender la unidad para los padres. • Pulse la tecla de alimentación o toque en la pantalla para ver el video de nuevo.



Angelcare® garantiza al propietario original de este producto que el monitor de sonido, movimiento y vídeo recargable Angelcare® (modelo AC1100) no posee defectos de material ni mano de obra durante un período de un (1) año desde la fecha de compra original. Si este sistema de monitorización no funciona correctamente cuando se utiliza según se indica y en condiciones normales durante el período de un año, Angelcare® reparará o reemplazará el producto, según nuestro criterio, sin ningún coste. Comuníquese con su distribuidor.

El producto debe estar acompañado de un comprobante de compra, ya sea una factura u otro comprobante de que el sistema de monitorización se encuentra dentro del período de la garantía. Angelcare® se hará cargo del coste de reparación o sustitución del producto, y también del envío a su domicilio.

Esta garantía no se aplica a los productos dañados como resultado de un mantenimiento incorrecto, accidente, suministro de voltaje inadecuado o cualquier otra forma de uso indebido. La garantía también quedará anulada si el propietario repara o modifica el producto de cualquier manera. Angelcare® no es responsable de los daños incidentales o consecuentes producidos en relación con este producto. La garantía también excluye todas las responsabilidades que no se especifican en la sección anterior. No se otorga ningún otro tipo de garantía.

LOS DERECHOS LEGALES VARIAN SEGÚN EL PAÍS. ALGUNOS PAÍSES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO.

EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES DE LOS RESULTADOS DERIVADOS DEL USO DE ESTE PRODUCTO.

IMPORTANTE: este monitor Angelcare® es un producto de cuidado personal. No lo devuelva a la tienda. Si tiene preguntas o necesita ayuda, llame a su distribuidor antes de devolver el producto.

Mantenimiento de su monitor Angelcare®

- **GUARDE LAS INSTRUCCIONES:** guarde el manual del usuario para futuras consultas.
- **DAÑOS POR AGUA, HUMEDAD Y CALOR:** mantenga todos los componentes alejados del agua (lavabo, tina, piscina) y de lugares que emitan calor (estufa, radiador).
- **VENTILACIÓN:** coloque SIEMPRE ambas unidades sobre una superficie plana en posición vertical para que el aire fluya libremente a su alrededor. La almohadilla del sensor está hecha de plástico y no permite que el aire circule. Por tanto, podría aparecer moho debajo del colchón en la zona de la almohadilla del sensor. Recomendamos girar periódicamente el colchón para evitar la aparición de moho.
- **FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA:** utilice solo los adaptadores de CA que se suministran con el monitor Angelcare®.
- **PROTECCIÓN DE LOS CABLES:** evite dañar los cables de los adaptadores y de la almohadilla del sensor. Coloque los cables de tal manera que no se puedan pisar ni presionar con los elementos que se sitúen encima de ellos o junto a ellos.
- **LIMPIEZA:** desconecte todas las unidades antes de limpiarlas. NO las sumerja en agua. Utilice un paño seco para eliminar el polvo del monitor. NO rocíe productos de limpieza ni disolventes. Limpie la almohadilla del sensor con un paño humedecido ligeramente con un producto antiséptico o detergente suave.
- **INGRESO DE LÍQUIDOS Y OBJETOS:** se deben tomar las precauciones necesarias para evitar la caída de objetos o el derrame de líquidos sobre las unidades o sobre la almohadilla del sensor a través de sus aberturas.
- **PERÍODOS DE NO UTILIZACIÓN:** cuando no utilice el monitor durante un período prolongado, quite las pilas de ambas unidades y desconecte los adaptadores de CA de la toma de corriente eléctrica.

Ajustes de fábrica y especificaciones técnicas

Modo sonoro	ENCENDIDO
Modo movimiento	ENCENDIDO
Tic	ENCENDIDO
VOX	ENCENDIDO
Volumen del altavoz de la unidad para los padres	NIVEL 3 DE 6
Nivel VOX (sensibilidad del micrófono)	NIVEL 2 DE 4
Sensibilidad de la almohadilla del sensor	NIVEL 3 DE 5
LCD	ENCENDIDO
Escala de la temperatura	Celsius
Temporizador	APAGADO
Alarma de temperatura	APAGADA
Alarma de temperatura alta	30 °C
Alarma de temperatura baja	19 °C
Modo de alarma	Solo alarma de sonido

Intervalo: hasta 655 pies (200 m)

Número de canales: E. U./Canadá : 19 canales

Fuente de alimentación: tres pilas alcalinas AAA (LR03) (no incluidas) o un adaptador de 7,5 V de CA para la unidad del cuarto del bebé.

Tres pilas recargables AAA (LR03) y un adaptador de 7,5 V de CA para la base de carga de la unidad para los padres.

PRECAUCIÓN: para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia o a la humedad.

Existe peligro de explosión si la pila se reemplaza de forma incorrecta. Las pilas incluidas son 3 pilas recargables AAA NIMH fabricadas por GPI International Limited, GN60AAHC, de 1,2 V y 600 mAh. Solo se deben sustituir por 3 pilas recargables AAA NIMH.

Pilas:


No mezcle pilas nuevas y viejas

No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (Ni-Cd, Ni-Mh, etc.)

Transmisión:

La transmisión de datos entre la unidad para los padres y la unidad para el cuarto del bebé se realiza a una frecuencia de 2,4 GHz.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ErP
(PRODUCTOS QUE UTILIZAN ENERGÍA)

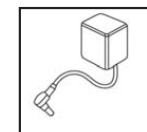

Reino Unido – Malta – Chipre – Singapur
Utilice solamente fuentes de alimentación de la marca Angelcare - número de modelo T07505B001"

"UE
Utilice solamente fuentes de alimentación de la marca Angelcare - número de modelo T07505V001



¡Proteja el medioambiente!

Este equipo electrónico contiene material reutilizable y no debe eliminarse junto con los residuos domésticos. Llévelo hasta un centro de recolección de equipos eléctricos y electrónicos (consulte a las autoridades locales para obtener información).

AVISOS

O incumprimento destes avisos e das instruções de montagem pode resultar em ferimentos graves ou morte.

Este produto foi concebido para ajudá-lo a monitorizar o seu filho. Ao utilizar o intercomunicador, deve continuar a fornecer a supervisão necessária para a segurança contínua do seu filho. Certifique-se de que o transmissor e o receptor estão a funcionar correctamente e que se encontram dentro do alcance um do outro.

Este produto NÃO substitui a supervisão directa do seu bebé. Verifique regularmente as actividades do seu bebé. A monitorização de bebés prematuros ou bebés considerados como sendo de risco deve ser sempre efectuada sob a supervisão de um profissional de saúde.

PERIGO DE ESTRANGULAMENTO. Mantenha os fios do transformador fora do alcance das crianças. Não utilize com fios de extensão.

- NÃO coloque a unidade do bebé ou o respectivo fio ao alcance do seu filho. Não coloque a unidade do bebé dentro de um berço ou parque.

Proteja os fios do transformador de CA. Coloque-os de modo a não serem pisados nem trilhados pela mobília ou outros itens.

Proporcione uma ventilação adequada quando as unidades estiverem a ser utilizadas. Não cubra a unidade para os pais ou as unidades para o quarto do bebé com objectos, tais como um cobertor. Não a coloque numa gaveta ou em qualquer local que abafe o som ou que interfira com o fluxo normal de ar.

NÃO mergulhe qualquer peça da unidade do bebé, da unidade para os pais, base sensora, transformadores ou base de encaixe em água ou qualquer outro líquido. Limpe utilizando apenas um pano seco.

NÃO coloque a unidade perto de água ou de humidade. Não utilize a unidade do bebé no exterior. Não utilize a unidade do bebé perto de áreas possivelmente molhadas, tais como uma banheira, chuveiro, bidé, lavatório, pia, piscina, cave húmida, etc.

Mantenha a unidade do bebé afastada de fontes de calor, tais como lareiras, radiadores, fogões e televisões ou outros aparelhos domésticos. O calor pode danificar a estrutura ou os componentes eléctricos.

NÃO coloque a unidade dos pais perto de equipamentos de transmissão ou fornos microondas. Estes equipamentos podem provocar alterações de transmissão do sinal de alarme.

AVISO: Este produto não é um brinquedo.

"Não utilize a unidade do bebé se:

- Os fios ou as fichas do transformador estiverem danificados.
- A unidade tiver sido exposta a líquidos.
- A unidade tiver caído ou estiver danificada."

NÃO ABRA a unidade do bebé, a unidade para os pais, a base da unidade para os pais, a base sensora ou os transformadores. Sem peças reparáveis pelo utilizador no interior. Risco de choque eléctrico, incêndio ou morte.

A antena utilizada para este transmissor deve ser instalada a uma distância de 20 cm (7,9") de todas as pessoas e não deve ser colocada ou utilizada em conjunto com outras antenas ou transmissores.

IMPORTANTE: Só deve utilizar pilhas recarregáveis na unidade para os pais. NÃO utilize pilhas alcalinas, pois tal irá danificar

gravemente a unidade. Antes da primeira utilização, carregue as pilhas durante 16 horas. Certifique-se de que o intercomunicador está desligado durante esse período. Utilize apenas os transformadores de CA fornecidos com o intercomunicador.

NÃO utilize esses transformadores com outros equipamentos.

Ao retirar da tomada o transformador de CA da unidade do bebé, certifique-se de que o mesmo se encontra desligado. Se não estiver desligado, a unidade irá alternar para o modo de funcionamento a pilhas, caso estejam colocadas.

Pode utilizar pilhas recarregáveis na unidade do bebé, mas não serão carregadas ao ligar o transformador de CA. Para as recarregar, remova as pilhas e utilize um carregador externo.

Coloque sempre a unidade do bebé e a unidade para os pais numa superfície plana e na vertical, proporcionando uma ventilação adequada.

Evite danificar a base sensora e os fios do transformador. Coloque os fios de modo a não serem pisados nem trilhados por itens colocados sobre ou contra eles.

Coloque o fio da base sensora apenas sob o colchão do berço e fora do alcance das crianças.

Utilize APENAS pilhas recarregáveis AAA (LR03) e/ou os transformadores de CA fornecidos para a unidade para os pais.

Durante longos períodos de tempo sem utilização do equipamento, retire todas as pilhas dos seus compartimentos e desligue os transformadores de CA.

Este intercomunicador utiliza ondas hertzianas públicas para transmitir sinais. A unidade para os pais pode captar sinais ou interferências de outros intercomunicadores para bebés na sua área. O seu intercomunicador também pode ser captado noutras residências. Para proteger a sua privacidade, certifique-se de que ambas as unidades estão desligadas quando não estiverem a ser utilizadas.

Quando utilizar o intercomunicador, não utilize móveis ou outros acessórios de berço que possam produzir vibrações. Outras fontes de vibração podem incluir ventoinhas, máquinas de lavar, música alta, etc. Estas fontes de vibração podem interferir com o desempenho do seu intercomunicador Angelcare® e o alarme não será emitido se continuar a detectar movimento para além do movimento do seu bebé. Certifique-se de que todas as fontes de vibração são eliminadas antes de utilizar o intercomunicador.

Podem ocorrer falsos alarmes por várias razões. A mais comum é o facto da unidade do bebé não ter sido desligada após retirar o bebé do berço. Outra razão é a base sensora não ter sido colocada correctamente sob o colchão. Certifique-se de que a base sensora está numa superfície plana e firme com o lado impresso virado para cima. Pode ser necessário ajustar o nível de sensibilidade. Consulte a secção de ajuste da sensibilidade ao movimento.

Verifique imediatamente o seu bebé sempre que for emitido um alarme.

O intercomunicador pode ser utilizado em qualquer berço estável e concebido para que um bebé se encontre em segurança. Se o berço possuir uma base com ripas ou molas, é necessário colocar uma placa de Masonite sob a base sensora. Este suporte deve ter pelo menos 33 cm (13") de comprimento nos quatro lados e 6 mm (1/4") de espessura. Utilize apenas o intercomunicador Angelcare® num ambiente para dormir estável, tal como um berço onde a base sensora possa estar apoiada numa superfície completamente plana e firme.

AVISOS DA FCC

Alterações não autorizadas pelo fabricante podem invalidar a autoridade dos utilizadores para utilizar este aparelho.

NOTA: o equipamento foi submetido a testes e encontra-se em conformidade com os limites de um aparelho digital classe B, de acordo com a Secção 15 das regras da FCC. Esses limites destinam-se a fornecer uma protecção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento cria, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais para as comunicações de rádio.

No entanto, não há qualquer garantia de que não ocorrerão interferências numa instalação em particular. Se este equipamento provocar interferências prejudiciais para a recepção televisiva ou de rádio, o que pode ser verificado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é aconselhado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais medidas a seguir apresentadas:

- Reoriente ou coloque a antena de recepção noutra local.
- Aumente a distância existente entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consulte o representante ou um técnico de televisões/rádio com experiência para obter ajuda.

"Este aparelho está em conformidade com a secção 15 das regras da FCC.

O seu funcionamento está sujeito às duas seguintes condições:"

- (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas, e
- (2) Este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam provocar um funcionamento indesejado.

PERIGO DE ESTRANGULAMENTO. Mantenha o cabo do adaptador e o cabo do sensor de movimentos fora do alcance das crianças. **Mantenha a unidade do bebé a mais de 3 pés (1 metro) de distância da cama.**